



SISTEMAS CAD/CAM | INSTRUMENTOS | SISTEMAS DE HIGIENE | UNIDADES DE TRATAMIENTO | **SISTEMAS RADIOLÓGICOS**

Vario^{DG} – EQUIPO RAYOS X INTRAORAL

Fácil, sencillo y económico – ideal para la radiología digital.

The Dental Company

sirona.

Vario^{DG}

Radiología intraoral sencilla y económica.

La radiografía intraoral es una herramienta indispensable en el diagnóstico dental de cada día. El nuevo sistema radiológico intraoral Vario^{DG} forma parte de la famosa línea de productos HELIODENT de Sirona incluyendo las usuales características atractivas. Además de la radiología convencional basada en película, el económico equipo CA es especialmente adecuado para la radiología digital.




Manejo fácil

Gracias al temporizador TipSet, la utilización del Vario^{DG} es un juego infantil. Utilice los probados símbolos de dientes y pacientes Sirona para seleccionar fácilmente los parámetros de exposición correctos y cambiar entre el ajuste tradicional y digital presionando un botón.

Calidad de imagen excelente

Las imágenes radiológicas de Vario^{DG} son exactas y muestran un volumen de contraste especialmente alto permitiendo un excelente reconocimiento de detalle. La base perfecta para su diagnóstico.

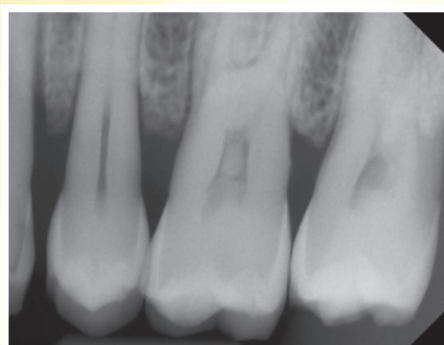

Integración flexible

En la sala de rayos X o justo al lado de la unidad de tratamiento, con la posibilidad de elegir el modelo de pared o el equipo móvil, Vario^{DG} está siempre a su disposición. Con tres longitudes del brazo de soporte a elegir, el equipo siempre cabe perfectamente en el espacio de trabajo disponible.

Datos técnicos	
Tamaño de foco	0,4 (CEI 336)
Tensión del tubo	70 kV
Corriente del tubo	3.5 mA (7 mA equivalente)*
Ajustes	0,21–11,2 mAs (0,06–3,2 s)
Tensión nominal	120 V o 240 V
Longitudes del brazo	Elegible entre 30 cm, 60 cm o 80 cm
Medios del detector	Individualmente elegible

* A causa del doble tiempo de exposición

Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Alemania
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.es

The Dental Company

sirona.